



Оборудование предназначено только для использования по назначению врача!!!


Настраивать аппарат может только врач.

Параметры вентиляции индивидуальны для каждого пациента.

Меры безопасности:



- Пользоваться аппаратом и компонентами разрешается только при отсутствии на них внешних повреждений.
- Попадание воды и грязи в аппарат может стать причиной его повреждения.
- Транспортируйте аппарат только с установленной крышкой и в соответствующей сумке для перевозки.
- Не транспортируйте и не опрокидывайте аппарат с наполненным увлажнителем вдыхаемого воздуха.
- Работа аппарата разрешается только с имеющимся в комплекте блоком питания при напряжениях от 100 до 240 В.
- Подключайте к данному аппарату только приборы и модули, допущенные согласно инструкции по пользованию.
- Опасность травмирования вследствие загрязнения и инфицирования системы трубок пациента!
- Чрезмерные температуры могут привести к перегреву аппарата и его повреждению.
- Не накрывайте аппарат и блок питания материей.
- Не используйте аппарат вблизи отопительных приборов.
- Не подвергайте аппарат прямому воздействию солнечных лучей.
- Выполняйте надлежащую гигиеническую обработку систем трубок многократного пользования.
- Опасность травмирования в результате неправильного положения дыхательной трубки (не укладывать дыхательную трубку вокруг шеи, не зажимать дыхательную трубку).
- Храните в недоступном для детей месте.

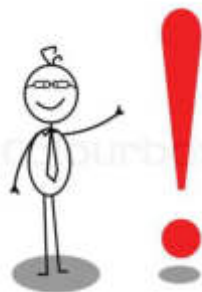

При использовании НИВЛ необходимо активно сотрудничать с медицинским персоналом, т.к. в небольших % случаях использования встречается:

- 1) риск развития аэрофагии;
- 2) риск аспирации содержимого полости рта и желудка;
- 3) мацерация и некрозы кожи в местах прилегания маски;
- 4) гипоксемия при смещении маски;
- 5) конъюнктивиты;
- 6) высыхание рото- и носоглотки;
- 7) носовые кровотечения.
- При появлении первых признаков изменения состояния, немедленно сообщите врачу по паллиативной помощи!

Очистка и дезинфекция

	<p>Перед гигиенической обработкой отсоединить прибор от сети электропитания.</p> <p>Не погружать аппарат и его компоненты в жидкость.</p> <p>Не заливать аппарат и его компоненты жидкостями.</p> <p>ОПАСНОСТЬ ТРАВМ ВСЛЕДСТВИЕ УДАРА ТОКОМ!</p>
<p>НАРУЖНЫЙ КОРПУС</p> 	<p>Выключите аппарат. Отключите от электропитания. Снимите увлажнитель вдыхаемого воздуха. Проведите гигиеническую обработку.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Корпус – влажное протирание водой или слабым мыльным раствором.2. Зеркальные поверхности корпуса - влажное протирание водой или слабым мыльным раствором, не использовать салфетку из микрофибры.3. Дисплей – вытереть насухо, не использовать воду.4. Дезинфекция путем протирания. <p>ЕЖЕНЕДЕЛЬНО</p>
<p>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Гигиеническая обработка дыхательной трубки, обработка маски</p>  	<p>Гигиеническая обработка дыхательной трубки теплой водой с моющим средством.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Снимите дыхательную трубку с аппарата.2. Проведите гигиеническую обработку (очистка теплой водой с моющим средством, дезинфекция путем погружения)3. Промыть дыхательную трубку чистой водой.4. Тщательно отряхнуть.5. Подвесить дыхательную трубку и дождаться пока стечет вода.6. Тщательно высушить. <p>После каждого использования маску необходимо промыть под проточной водой. Перед тем как промыть маску, разберите ее на составные части и все части тщательно промойте от мокроты и слизи. Используйте хозяйственное мыло и губку.</p> <p><u>Использовать дыхательную трубку, маску только в полностью высушенном состоянии.</u></p>

Ссылка: Видео-инструкция как подключить и использовать аппарат для НИВЛна сайте pro-palliativ.ru

**Консультация и осмотр врача после настройки аппарата
– не реже 1 раза в месяц**

В случае возникающих вопросов по работе медицинского оборудования необходимо обратиться в кабинет паллиативной помощи по телефону 8(3452) 56-14-48